

EZS 3056 – elektrický zubní kartáček



Bezpečnostní upozornění

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Elektrické připojení

1. Než zapojíte kabel do zásuvky ujistěte se, že zásuvka je řádně nainstalovaná.

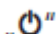
Připojte zařízení do zásuvky.

Nabíjení

Před prvním použití přístroj nabijte.

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a stiskněte ještě jednou tlačítko O na přístroji.
2. Postavte zubní kartáček na stanici.
3. Zapojte kabel do zásuvky. Délka prvního nabíjení je cca 14 hodin. Maximální doba nabíjení je 48 hodin. Pokud necháte přístroj déle v zásuvce tak se může stát, že to zkrátí životnost baterie.

Používání

1. Nasadte kartáček na tělo přístroje a pootočte ve směru hodinových ručiček.
2. Namočte nástavec kartáčku a naneste pastu na zuby.
3. Vypláchněte si pusou vodou.
4. Přístroj zapněte až po vložení kartáček do úst, aby jste předešli potřísnění vodou.
Vyberte jeden z módu: clean, sensitive, massage.
Clean: Vysoká rychlost
Sensitive: doporučeno pro každodenní použití
Massage: doporučeno pro rovnátka, citlivé zuby, masáž dásní.
5. Pohybuje kartáčkem pomalu v ústech. Zubaři doporučují si čistit zuby po dobu 2 min.
6. Vypněte přístroj. 

Náhradní nástavce na kartáček

- Doporučujeme při každodenním použití vyměnit nástavec po 2 měsících pro optimální čistící účinek.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

Stáhněte hlavici kartáčku dolů. Netahejte za kartáček samotným, nýbrž za spodní díl nástavce a vyčistěte jej pod tekoucí vodou! K čištění hlavy kartáčku nepoužívejte žádné přísady!

- Přístroj je vodotěsný a lze jej čistit pod tekoucí vodou! Nikdy tento komplet neponořujte do vody.
- K čištění nepoužívejte žádné drsné čistící prostředky! Mohlo by dojít k poškození těsnění a pouzdra přístroje!
- K čištění přístroje můžete používat také běžný mýdlový loup.
- Kovový spoj na elektrickém zubním kartáčku by se měl každý týden umýt teplou vodou.

1. Vypněte přístroj před čištěním.
2. Kryt přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem.



3. Sejměte hlavu kartáčku a vyčistěte jej pod tekoucí vodou.

Technické data:

Model:..... EZS 3056
Ochrana:..... IPX7
Hmotnost:..... cca 0,80 kg
Baterie:.....260 mAh Li-Ion, DC 3,7V
Ochranná třída stanice/zubní kartáček..... II/III

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně technických předpisů. Vyhrazuji si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.