


FT 3057 - DIGITÁLNÍ TEPLOMĚŘ

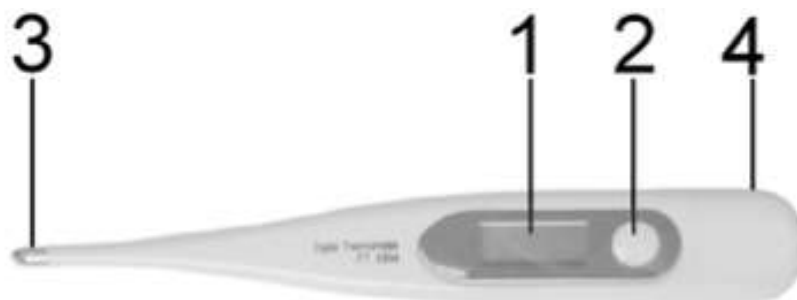

Speciální bezpečnostní opatření

Používejte tento přístroj výhradně k osobním a pro něj předpokládaným účelům. Chraňte přístroj mimo dosah dětí. Z hygienický důvod doporučujeme přístroj používat buď jenom rektálně nebo orálně. Nepotápět přístroj do vody, nekousat a porsíme neohýbat. Siliny nesmějí přijít do kontaktu s displejem. Měřicí přístroj nesmíte opustit a musíte zabránit těžkým nárazům.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Vložení baterií

1. Vysuntě krytku na přihrádce s baterií.
2. Vyměňte baterii v teploměru.
3. Zavřete přihrádku.

Na displeji se zobrazí symbol vybité baterie.

Nastavení - celsia a farenheity

- Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se zobrazí „LO“ a rozbliká se „C“ nebo „F“.
- Přidržte tlačítko ON/OFF po dobu několika vteřin.
- Na displeji se zobrazí zvolený výběr.

Měření

- Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Na displeji se objeví LO po krátkém čase začne blikat „C“.
- Po dobu měření zůstaňte v klidu stát nebo sedět a spusťte měření.
- Začněte s měřením. Při orálním měřením si vložte senzor do úst a zavřete je. Normální teplota je 37 C.
- Potřebujete teplotu změřit rektálně zaveďte opatrně, nakrémujte špičku teploměru například vazelínou a zaveďte max. 2 cm. Normální teplota činí 37,5 C.
- Po ukončení měření se cca po 90 sekundách ozve signál. V případě že je teplota příliš vysoká zobrazí se Hi „C“. V případě, že je měření příliš nízké uvidíte Lo C.
- Délka měření - rektálně – 40 až 60 vteřin, délka měření - podpaží – 80 až 120 vteřin, délka měření – orálně – 50 až 70 vteřin.
- Po 8 minutách nečinnosti nebo stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj vypnete.
- Po dalším spuštění se zobrazí poslední měřená teplota.

Údržba a skladování

- Použijte suchou tkaninu k vyčištění přístroje, toto doporučujeme po každém použití.
- Nepoužívat žádné silné čisticí přípravky.
- Při dlouhodobějším, nepoužíváním měřicího přístroje je dobře vyndat baterie. Vytékající baterie mohou způsobit poškození.
- Po použití teploměr uložit do plastového pouzdra.
- Měřicí přístroj je nutno chránit před přímým sluncem, vysokou teplotou, vlhkostí a prachem.
- Nevystavovat extrémně nízkým teplotám pod mínus 20C nebo vysokým přes 60 C.

Technické data

Typ: FT 3057
Měření:..... 32 – 42,9 C, 42,9/109 F
Přesnost měření:..... +/- 0,1 C (35,5 C/95,9 F – 42, 0C/107,6 F)
..... +/- 0,2 C/ 0,4 F (32,0C/89,6F/ 35,5C/95,9 F)
Displej: LCD displej
Životnost:..... 3 roky
Frekvence: 50 Hz
Tlak vzduchu: 700 – 1600 hPa
Přechodná doba odezvy:..... 12s
Netto hmotnost: cca 16,2 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.
Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnici ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“

Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst. Prosím pomozte chránit životní prostředí správnou likvidací odpadů a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí zdraví nás všech.

Přispějte tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických zařízení. Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech.

